



Prime Medics

Making Aesthetic Innovation Accessible

פריים מדיקס - הבית המקצועי שלך לציוד אסתטי מתקדם, בטיחותי ומשתלם!

שמחים להיות שותפיהם להצלחה



לעוד פרטים ומידע:

055-982-9922

באינסטגרם:

@ PRIME MEDICS IL

www.p-medics.co.il



ELASTY® **Ölidia®** *Collajin®*  Sofiderm  YOURLINE


Prime Medics
Making Aesthetic Innovation Accessible



פריים מדיקס הינה יבואנית ומפיצה מובילה בישראל
לציוד רפואי בדגש על התחום האסתטי.

ONE STOP SHOP לחברה סל מוצרים רחב המהווה
לציוד מקיף לקליניקות אסתטיות הכולל
מותגים מובילים מהעולם, מוצרי הזרקה,
תרופות מרשם, ציוד מתכלה ועוד.

פריים מדיקס החלה את פעילותה בשנת 2016
ומאז מייבאת מוצרים מובילים בטכנולוגיות מתקדמות
מספקים בעלי שם עולמי, בדגש על מקצועיות,
איכות ושירות ברמה הגבוהה ביותר.

החברה עורכת הדרכות והשתלמויות
מקצועיות בהם סמינרים, קורסים והדרכות בקבוצות
או בשיעורי אחד על אחד עם הרופאים המובילים בענף,
על מגוון הפרוצדורות והמוצרים בהן הזרקות, חוטים ועוד.

כל המוצרים עומדים בתקנים מחמירים
ובעלי אישור משרד הבריאות בנוסף ל
KFDA / FDA / CE

שיווק ומכירה לרופאים, מרפאות ובתי חולים בלבד.



לעוד פרטים ומידע:
055-982-9922

באינסטגרם:
@ PRIME MEDICS IL

www.p-medics.co.il



ביו-סטימולטורים:

- 1-2 **Olidia** חומצה פולילקטית
- 3-4 **Sunekos Performa + Sunekos 1200**
- 5-6 **Collaju** קולגן להזרקה
- 7-8 **Sofiderm Regeneration M**

סקין בוסטרים:

- 9 **Sofiderm Meso + Resurrection**
- 10 **Sofiderm Lift + Wrinkle Fighter**
- 11 **Sofiderm Light + Vital**
- 12 **Sofiderm Hair Solutions**

עידוד וחידוש השיער:

- 13 **Sofiderm ACNE Solutions**

מזותרפיה:

- 14-15 **Sofiderm Mesotherapy Solutions**

מסכות פנים רפואיות:

- 16 **Sofiderm Liquid Dressing**

חומרי מילוי:

- 17-18 **ELASTY** חומצה היאלורונית
- 19 **Sofiderm Classic** חומצה היאלורונית
- 20 **Sofiderm ULTRA** חומצה היאלורונית

מוצרי עזר להזרקה:

- 21 **ELASTY** מחטי ומזרקי
- 22 **ELASTY + ELABO** קבולות

חוטי מיצוק והרמה:

- 23-24 **ELASTY** חוטי הרמה
- 25-27 **YOURLINE & EPLINE** חוטי מיצוק
- 28 **YOURLINE & EPLINE** חוטי הרמה
- 29 **YOURLINE & EPLINE** חוטי מחט כפולה

מכשור:

- 30 **SONO-FINDER** אולטרסאונד נייד לקליניקה

טיפול גוף:

- 32 **ELASTY Glam APPEAL**
- 31 10ml **Sofiderm**
- 33-34 **Sunekos CELL + Sunekos BODY**
- 35 **Sunekos Inticare**

Olidia® הפולילקטית המתקדמת בעולם.

מתן נפחים טבעיים והשבחת העור. היחידה לתוצאות אחידות בכל הפנים כולל שקעי העיניים ואזור הבר-קוד. לטיפול בפנים ובגוף, לשיפור מרקם העור, החלקת קמטוטים, הפחתת צלקות, סימני מתיחה ועוד... לתוצאות הנמשכות מעל 25 חודשים.

תכולת ה-Vial:

365 מ"ג

150mg Poly-L-lactic acid
90mg Sodium Carboxymethylcellulose
125mg Mannitol

התווית שימוש:

אזורי הפנים כולל אזורים עדינים ובגוף

התווית נגד לשימוש:

תהליך זיהומי או דלקתי פעיל, מחלה אוטואימונית, טיפול מדכא חיסון או סכרת לא מאוזנת.

ציוד נלווה נדרש:

מים סטרילים להזרקה
לידוקאין 2%
מחט שאיבה
מזרקי 10מל + 3מל וקונקטור (אופציונלי)
קנולות 22G (23G בקנולות ELASTY)
מחטי 25G (27G במחטי ELASTY)



מנגנון פעולה

אולידיה היא ביוסטימולטור מהפכני, המעודד את הגוף ליצירה מואצת של קולגן ומחזירה את הנפח הטבעי לעור. הטיפול מעורר תהליך ביולוגי ולכן תוצאות ראשוניות מופיעות כחודשיים לאחר ההזרקה הראשונה ותהליכי ייצור הקולגן המוגברים ימשכו מעל שנתיים. 80% מהתוצאה הסופית תישמר מעל ל-25 חודשים.

בהתאם למצב הרפואי, ניתן לבצע מספר טיפולים בהפרש של 4-6 שבועות על מנת להגיע לתוצאות מיטביות.

תוצרי הפירוק של ה-PLLA בגוף הינם טבעיים: CO₂, סוכר ומים.



חודשיים לאחר סיום 2 טיפולים.
טיפול שני בהפרש שישה שבועות מהראשון.


חלקיקים מולקולריים קטנים במיוחד

Olidia® מיוצרת בשיטת ההפקה העומדת בחוד החנית מבחינה טכנולוגית. בזכות כך, היא מכילה חלקיקים קטנים במיוחד, בגודל ממוצע של $45\mu\text{m}$ - 140KD המאפשרים מהירה ובטיחות גבוהה יותר. לכן את אולידיה בטוח להזריק גם באזורים עדינים.

לא רק שהחלקיקים באולידיה קטנים במיוחד, הם גם בעלי צורה עגולה, אחידה ובעלי מרקם רך מה שמיעל ומאיץ את קצב יצירת הקולגן.

היתרונות המשמעותיים של אולידיה:

1. שימוש באזור הנזולאביאלים
2. שימוש באזור שקעי העיניים
3. שימוש באזורי המצח והגלבלה
4. שימוש באזורים אינטימיים

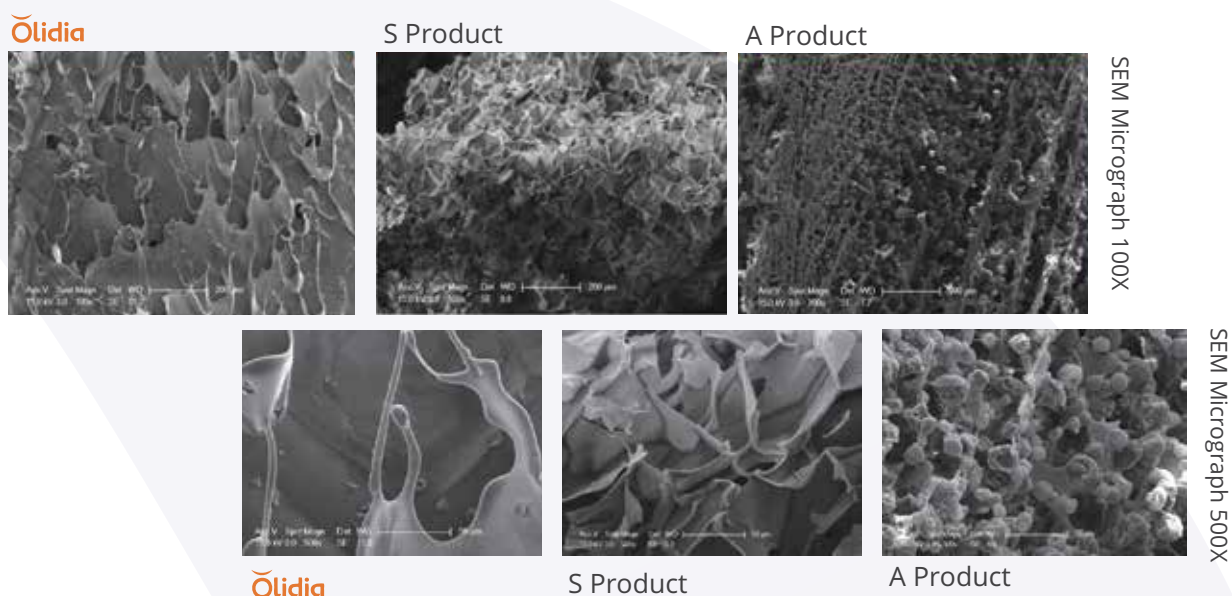

המלצות לשימוש

מהילה מומלצת לטיפול באזורי הפנים והגוף:

$365\text{mg OLIDIA} + 7\text{ml WFI} + 2\text{ml Lidocaine} = 10\text{ml for Injection}$

מהילה מומלצת לטיפול באזורי הצוואר והדקולטה:

$365\text{mg OLIDIA} + 14\text{ml WFI} + 2\text{ml Lidocaine} = 17\text{ml for Injection}$

להזרקה מיטבית, על זווית המחט להיות ב- 10° - 20° מעלות ובמישור מקביל לפני השטח של העור.

נוסחת הפטנט הבלעדית של Sunekos לשיפור מרקם העור, פורמולה טבעית המשמשת להעלמת קמטוטים, צלקות, נזקי שמש ופגמי עור ע"י עידוד התאים להתחדשות באופן עצמאי ומשמשת כאבני בניין לבניית תאים חדשים ועיבוי העור. תוצאות מרשימות כבר מהטיפול הראשון!

מותג מוביל
זוכה
פרסים
בינלאומיים!

תכולת הקופסה:

3.5ml X 2 vials

35mg of LMW HA (50-250KD)

128mg AA - HY6AA Formula: Glycine, L-Proline, L-Lysine MHC, L-Leucine, L-Valine, L-Alanine

התווית שימוש:

אזורי הפנים, הצוואר, דקולטה וצלקות בפנים ובגוף

התווית נגד לשימוש:

אין התוויות נגד משמעותיות מלבד התוויות כלליות של טיפולים אסתטיים

ציוד נלווה נדרש:

מזרקים ריקים בגודל מיטבי לנוחיותך
מחט שאיבה

קנולות 25G (בקנולות ELASTY 27/30G)
מחטי 30G (מחטי ELASTY 32-34G)



פורמולת HY6AA

נוסחה זוכת פרסים, המכילה חומצה היאלורונית טהורה בריכוז גבוה ושילוב של 6 חומצות אמינו ייעודיות, המהוות את אבני הבניין של החלבונים וגורמות לפעילות טבעית בעור ולייצור תאי עור חדשים. ששת חומצות אלו נבחרו בקפידה על מנת לייצר את השילוב האופטימלי מדעית לשימוש כמזון לרקמות ולהתחדשות שנמשכת גם לאחר הטיפול.

Sunekos Performa:

נוסחה זו מחדשת את מטריצת הממברנה האנדופלזמית (ECM) של העור ובכך משפרת את הנראות, מחליקה קמטים ומפחיתה כהויות. ברמת התא, נוסחת הפטנט של סונאקוס גורמת ל-

גירוי הפיברובלסטים במטריצה החוץ תאית לייצור

סיבי קולגן מסוג 1 ו-3 ולראשונה גם מסוגי קולגן 4, 5 ו-7!




Sunekos 1200:

היא פורמולה המכילה תוספת של חומצה היאלורונית במשקל מולקולרי גבוה (HMW), המשמשת לטובת מתן נפחים ואפקטיביות גבוהה יותר של הטיפול הבסיסי. שימוש במוצר טרום הזרקת Performa מעלה אקספוננציאלי את זמן ייצור הקולגן והאלסטין.







סונאקוס - פטנט האמינו
וויטאט האטפ - פטנט האמינו

יש לבצע את ההזרקה בסדרה בת 3 מפגשים (ניתן לבצע טיפול נוסף במידת הצורך).
לשמירה על תוצאות מרשימות לאורך שנים ממולץ לבצע טיפול תחזוקה בודד 6-8 חודשים לאחר סיום סדרת הטיפולים.

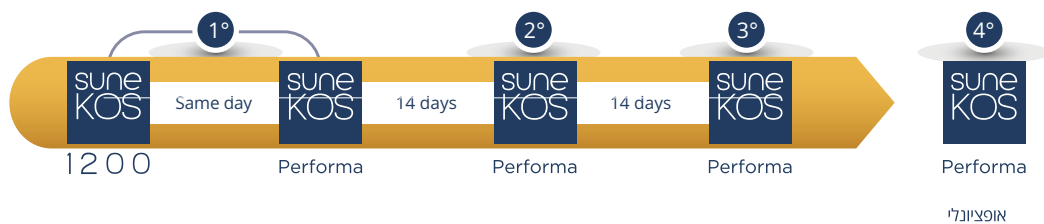


נקודות הזרקה:

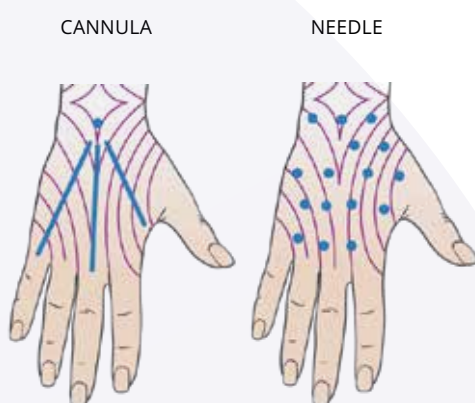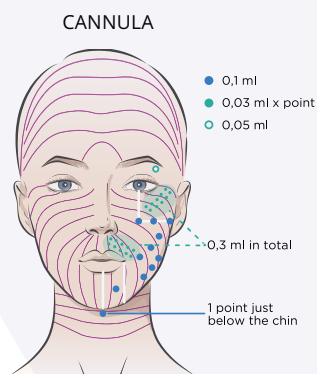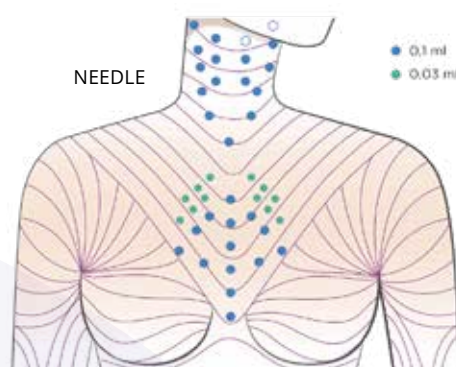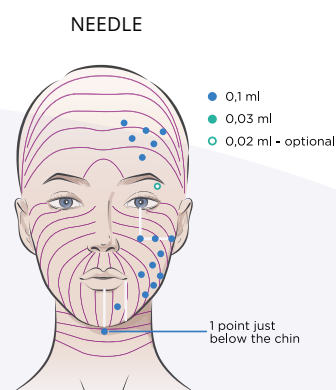


high
performance
technique

hpt

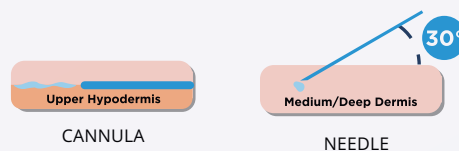

SUNEKOS 1200 + SUNEKOS PERFORMA - לטיפול באזור העיניים, פנים, צוואר ודקולטה.

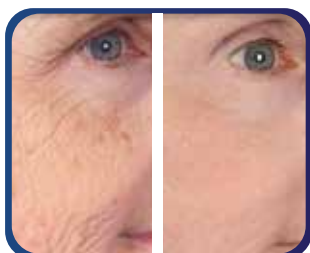

הקולגן הטהור הראשון בישראל המיוצר בטכנולוגיה ייחודית המפחיתה תגובות אלרגיות ומאפשרת אינטגרציה חלקה עם רקמות הגוף. מעורר ייצור קולגן טבעי בעור, מעניק תוצאה מיידית הממשיכה להשתפר, בטוחה ועמידה לאורך זמן.

תכולת המזרק:

Atelocollagen 30mg/1ml

התווית שימוש:

חידוש רקמות למראה טבעי בריא ואיכותי יותר של העור. קמטים נזולביאליים, שקעים באזור הלחיים, קווי מרינוטה וקמטי הבעה במצח ובין הגבות כמו כן ניתן לשימוש לטובת איזון אסימטריות עדינות בפנים

התווית נגד לשימוש:

אין התוויות נגד משמעותיות מלבד התוויות כלליות של טיפולים אסתטיים או רגישות ידועה לקולגן או חלבונים שמקורם מהחי

ציוד נלווה נדרש:

NACL 0.9%

לידוקאין 2%

2 מזרקי 5 מל ריקים (למהילה)

מגיע באריזה עם 2 מחטי שאיבה 18G


מומלץ לשימוש עם מחט 32G של אלסטי / 30G רגילות

קנולות 25G של אלסטי / 22G רגילות




מנגנון פעולה

קולגן ה-**Atelocollagen** הוא קולגן שעבר תהליך טיהור ייחודי בו משתמשים בריכוז גבוה של מלח נתרן (NaCl) ליצירת שיקוע קולגן, לאחר מכן מפרידים ומטהרים אותו, באמצעות תהליך זה, מסירים את קצות הטלופפטיד, ובכך משפרים את קליטתו ברקמות הגוף. התוצאה היא סיבי קולגן עבים הבטוחים מפני תגובה אלרגית, המאפשרים לו להשתלב ברקמות בצורה מיטבית. תאימות גבוהה לגוף משמע נספג במהירות ברקמות, מעודד רגנרציה ומגביר את הפרשת הקולגן הטבעי (Type I ו-Type III) לאורך זמן.

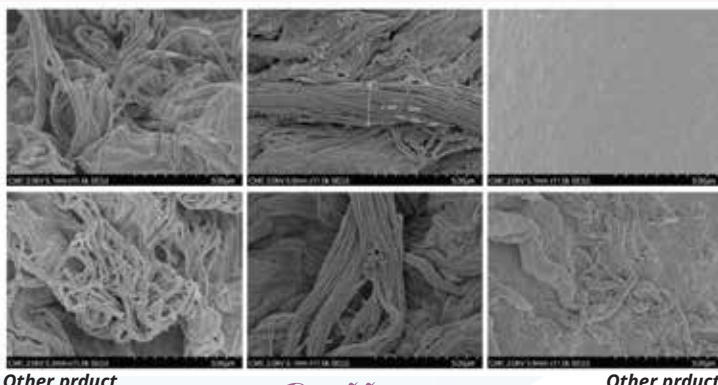

Collaju®

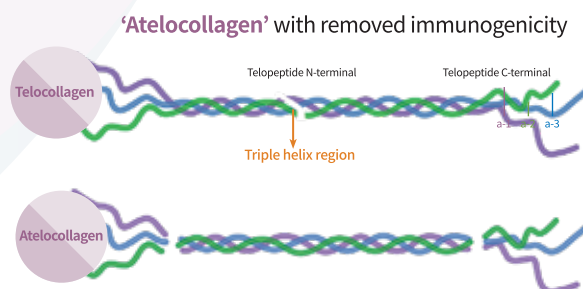

טיפול זה תורם לשיפור האלסטיות, המרקם ומיצוק העור. תוצאות משמעותיות ניכרות כבר בזמן הטיפול. ניתן לראות את שיא התוצאה כיומיים עד שלושה מהטיפול. עם הזמן, הקולגן הטבעי החדש שהגוף מייצר מחליף את הקולגן מהחומר המוזרק, מה שמוביל להתחדשות העור ולהארכת משך האפקט הקליני.

Collaju אינו רק חומר מילוי זמני – הוא פועל כמקדם ביוסטימולציה טבעית לחידוש העור, תוך שמירה על תוצאה טבעית ועמידה לאורך זמן. לכן נראה תוצאה ניכרת לעין גם לאחר 8 עד כ-12 חודשים.

הכוונה והמלצות שימוש

Collaju מספק פתרון מתקדם לשיקום העור, חיזוק האלסטיות והחלקת קמטים באמצעות קולגן טהור. יש להתאים את פרוטוקול ההזרקה בהתאם למטרת הטיפול:

לטיפול נפח (Volumizing):

עומק ההזרקה: שכבה תת-עורית (Subcutaneous).

קנולות 23G-27G.

מיועד לשיפור נפח והידוק העור.

שיטת ההזרקה המומלצת היא Fan Technique יצירת כמה קווים בתוך אזור ההזרקה.

לחיזוק איכות העור (Skin Booster):

עומק ההזרקה: שכבת הדרמיס.

מחטים 30G או מחטי אלסטי (ELASTY needles) 32G-33G.

מתאים לשיפור איכות הרקמה, החלקת עור והתחדשות העור.

שיטת ההזרקה המומלצת היא בשיטת פפולות

פרוטוקול הטיפול:

לאחר טיפול בודד: התוצאה נשמרת למשך 3-6 חודשים.

פרוטוקול מומלץ: סדרה של 3 טיפולים במרווחים של 4 שבועות ביניהם, מאפשרת שימור התוצאה למשך 12-18 חודשים.



בעוד שטיפול בודד מעניק שיפור מיידי הנשמר למספר חודשים, הסוד לתוצאה אופטימלית טמון בהתמדה. פרוטוקול הטיפול המומלץ, הכולל סדרה של שלושה מפגשים, יוצר אפקט מצטבר הבונה את איכות העור ומבטיח מראה חיוני ורענן שנשמר עד 18 חודשים. תחזוקה שנתית תבטיח את שימור התוצאה לאורך זמן.

Regeneration M פורץ דרך על ידי החלפת תמיסת הסליין הסטנדרטית בחומצה היאלורונית טהורה (Non-crosslinked), היוצרת סביבה ביולוגית אופטימלית (ECM) המעצימה את שגשוג התאים. בעוד ששרשראות ה-PN פועלות לתיקון נזקים ברמת ה-DNA ולהפחתת תהליכים דלקתיים (Anti-inflammatory), החומצה ההיאלורונית מעניקה "בוסט" מיידי של הידרציה עמוקה והזנת הרקמה. הסינרגיה הייחודית הזו מבטיחה שהעור לא רק ישתקם מבפנים, אלא גם יקבל נפח טבעי מעודן, מיצוק וגמישות משופרת שטיפול DNA רגילים אינם מספקים. זהו טיפול המשלב ריפוי עוצמתי ארוך טווח עם אפקט אסתטי של זוהר וחיוניות מיידי.

הכוונה והמלצות שימוש

לסדרת טיפול מלאה - עד 4 טיפולים בודדים בהפרש של חודש כל אחד, התוצאות ישמרו מעל שנה. לא מומלץ לבעלי רגישויות, חובה לבדוק רגישות לדגים טרם הטיפול.

האזור הפרי-אורביטלי (סביב העיניים):

מומלץ להימנע מהזרקה שטחית מדי, הזרקה שטחית מדי באזור דק זה גורמת לחומר ההידרופילי (סופח המים) לייצר נפיחות בולטת לעין.

יש להקפיד להזריק בתוך הדרמיס אך ברובד מעט עמוק יותר. טכניקה זו מסייעת לקליטה אופטימלית של החומר, מצמצמת את הסיכון לנפיחויות שטחיות ומבטיחה תוצאה אסתטית טובה יותר.

הזרקה כללית בכל שטחי הפנים (Full Face):

בטיפול באזורי הפנים הנרחבים (כגון לחיים, מצח וקו לסת),

מומלץ להזריק את החומר לשכבת הדרמיס (Intradermal) בשיטת הפפולות (גבשושיות קטנות).

יש לשמור על מרווחים של כ-1 עד 1.5 ס"מ בין נקודות ההזרקה ולהשתמש בכמות קטנה ומדודה

של כ-0.05 עד 0.1 מ"ל בכל נקודה.

כיוון שהחומר הידרופילי ומושך נוזלים מעצם טבעו, הקפדה על עומק הזרקה נכון קריטית גם באזורים אלו כדי לאפשר לחומר להתפזר בצורה הומוגנית ברקמה ולמנוע נפיחות מקומית או גבשושיות נראות לעין. ניתן לבצע את ההזרקה באמצעות קנולה בטכניקת מניפה (Fan Technique), לעומק עור שטחי עד בינוני.



PN - Sofiderm Regeneration M - סקין בוסטר מתקדם המכיל תאי גזע - הטיפול הרגנרטיבי המתקדם בעולם ועם הותק הרפואי הרב ביותר בישראל!

היחיד בתחום הפולינוקלאטידים המשלב בין יתרונות HA לרכיבי DNA טהורים אשר מקורם בדג הסלמון. להשפעה משמעותית על התחדשות רקמות ושגשוג תאים.

תכולת המזרק:

20mg/1ml Polynucleotides (PN)+
Sodium Hyaluronate (HA) Solution
Mannitol

התווית שימוש:

חידוש רקמות למראה טבעי בריא ואיכותי יותר של העור

התווית נגד לשימוש:

לא מומלץ לבעלי רגישויות, חובה לבדוק רגישות לדגנים!

ציוד נלווה נדרש:

מגיע עם מחטים באריזה: 2x30G
מומלץ לשימוש עם מחט 32G של אלסטי
ניתן להזריק גם בקנולה



	PDRN (Polydeoxyribonucleotide)	PN (Polynucleotide)
Molecular Type	Short-chain DNA fragments	Full-length, long-chain DNA strands
Source	Salmon sperm extract	Highly purified extract from salmon
Repair Capacity	Supports wound healing	Stronger tissue regeneration & microenvironment repair
Anti-inflammatory	Strong	Strong + Antioxidant effect
Skin Benefits	Hydration, photoaging improvement	plump the skin, promote firmness, refine texture, and boost elasticity
Duration	Typically 2-4 weeks	Longer lasting results (up to 4-6 weeks)

מנגנון פעולה

רכיבי PN הם שרשראות ארוכות של נוקלאוטידים המרכיבים מולקולות DNA ו-RNA. הם מכילים רצפים של בסיסים שונים (אדנין, גואנין, ציטוזין ותימין/אורציל) הנושאים מידע גנטי וממלאים תפקיד מכריע בתהליכים ביולוגיים שונים. שימוש בהם גורם לתוצאות ממושכות לחידוש העור ושיפורים באיכות העור, מיצוק וגמישות, הפחתת נראות של קמטים, קמטוטים ועור נפול, שיפור לחות העור והמרקם, הפחתת דלקתיות, אדמומיות והגנה על העור מנזקי שמש.

מטרת הטיפול היא הצערת העור במהירות וביעילות הן מבחינת פני השטח והן בשכבות העור העמוקות יותר. פולינוקלאטידים מקיימים אינטראקציה עם קולטנים ספציפיים בתאי העור, ובכך מקדמים את ההתחדשות התאית והייצור של סיבי קולגן ואלסטין חדשים.



סדרת סקין בוסטרים התורמים לשיפור מצבי עור שונים
כאשר לכל אחד מרכיב ייחודי אחר התורם ליעילותו הבלעדית.

Resurrection 3ml - לאחידות גוון העור

מכיל בנוסף לחומצה היאלורונית גם Trehalose, רב סוכר הידוע ביכולתו לספוח נוזלים ועל כן להעניק לחות מוגברת ומתן זוהר לעור. כמו כן, מסייע לשיפור גוון העור ולהבהרה.

תכולת המזרק: 3ml

10mg/1ml Sodium Hyaluronate
125mg Trehalose

התווית שימוש:

מתן זוהר לעור, לחות מוגברת ושיפור גוון העור

פרוטוקול שימוש:

לסדרת טיפול מלאה - חזרו על הפרוצדורה פעם בחודש למשך 2-3 מפגשים. ולאחר מכן חזרו על הטיפול כל 4 חודשים על מנת לשמר את התוצאה באופן קבוע.

ציוד נלווה נדרש:

מגיע עם מחטים באריזה: 2x30G
מומלץ לשימוש עם מחט 32G של אלסטי



Meso 3ml - להחלקת קמטוטים

סקין בוסטר המכיל חומצה היאלורונית לא מצולבת בריכוז גבוה במיוחד. 15mg לכל 1ml 45mg למזרק. תוצאותיו המרשימות מחליקות קמטוטים ומעניקות לחות מוגברת וברק.

תכולת המזרק: 3ml

15mg/1ml Sodium Hyaluronate

התווית שימוש:

הצרת העור, לחות, ברק לעור

פרוטוקול שימוש:

מצוין לטיפול זוהר לפני אירועים, לסדרת טיפולים מלאה בצעו שלושה מפגשים.

ציוד נלווה נדרש:

מגיע עם מחטים באריזה: 2x30G
מומלץ לשימוש עם מחט 32G של אלסטי



Lift - הרמה ושיפור מרקם

לראשונה שילוב ייחודי של חומצה היאלורונית עם התערובת האורגנית העוצמתית DMAE, תוסף הפלא הידוע כתומך במניעת הזדקנות העור, משפר כתמי גיל וכנוגד חמצון משמעותי המנטרל רדיקליים חופשיים, מסייע לשיפור נראות הקמטים ומשפר מצבים של צניחת עור. כמו כן DMAE נמצא יעיל כטיפול בעל יכולת ניטרול של השפעת בוטוליניום טוקסין! ומאפשר "תיקון" של הזרקה במקרה הצורך.

תכולת המזרק: 1ml

8mg/1ml Sodium Hyaluronate

5mg/1ml **DMAE**

(dimethyl-amino-ethanol)

התווית שימוש:

1. שיפור נראות הקמטים וצניחת העור
2. ניטרול השפעת בוטוליניום טוקסין

פרוטוקול שימוש:

לסדרת טיפול מלאה - עד 4 טיפולים בודדים
בהפרש של חודש אחד מהשני

ציוד נלווה נדרש:

מגיע עם מחטים באריזה: 2x30G
מומלץ לשימוש עם מחט 32G של אלסטי

**Wrinkle Fighter - להפחתת פעילות השרירים**

פורמולה חדשנית המשלבת HA עם Argireline ו-Pentapeptide-18, פפטידים טבעיים הפועלים באופן דומה לבוטוליניום טוקסין. ותורמים להפחתת הופעת קמטוטים וקמטי הבעה. **בעל שני שימושים:**

1. כטיפול עצמאי חליפי למניעת תופעת הסבילות לבוטוליניום טוקסין או לבעלי רגישות לרעלן.
2. כטיפול משולב עם בוטוליניום טוקסין להארכת משך השפעת הטיפול והתוצאה.

תכולת המזרק: 1ml

8mg/1ml Sodium Hyaluronate/

Argireline, Pentapeptide - 18

התווית שימוש:

מפחית הופעת קמטי הבעה, כגון Crow's Feet
מצח וגלבלה.

פרוטוקול שימוש:

1. שימוש עצמאי - סדרה בת 4 מפגשים בהפרש של חודש להפחתת פעילות השריר ל4 חודשים עד חצי שנה.
2. בשילוב עם בוטוליניום טוקסין - להזרקה מיד לאחר הטיפול להארכת משך זמן שיתוק השריר לחודשים נוספים.

ציוד נלווה נדרש:

מגיע עם מחטים באריזה: 2x30G
מומלץ לשימוש עם מחט 32G של אלסטי



הסקין בוסטרים שנותנים תוצאה ארוכת טווח בזכות השילוב המוכח של חומצה היאלורונית מצולבת וחומצה שאינה מצולבת באותו הטיפול.

SOFIDERM LIGHT - לחות וזוהר

מתן לחות, שיפור מרקם העור ואפקט משמעותי של זוהר, הקרוי גם "אפקט סינדרלה". לתוצאות ארוכות יותר בזכות מנגנון שחרור איטי של החומצה המצולבת.

תכולת המזרק: 3ml

30mg Sodium HA **Non** Crossed-linked
Sodium HA **2%** Cross-linked

התווית שימוש:


מתן לחות ואפקט זוהר לעור

פרוטוקול שימוש:

לסדרת טיפול מלאה יש לבצע 2-3 טיפולים אחת לחודש

ציוד נלווה נדרש:

מגיע עם מחטים באריזה: 2x27G
מומלץ לשימוש עם מחט 30G של אלסטי

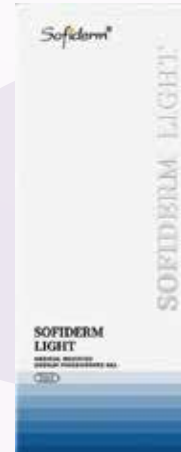

SOFIDERM VITAL - מתן נפחים עדינים

השילוב המושלם בין סקין בוסטר לחומר מילוי. הענקת לחות והזנה מצד אחד + שיפור מצב נפחים וקמטוטים מצד שני. מומלץ במיוחד לשימוש באזורים עדינים כגון טיפול בשקעי עיניים וקמטי בר-קוד.

תכולת המזרק: 3ml

30mg Sodium HA **Non** Crossed-linked
Sodium HA **4%** Cross-linked

התווית שימוש:

מתאים לכל הפנים ובמיוחד לטיפול מסביב לעיניים ומסביב לפה לשיפור קמטוטים וקמטים עדינים כמו כן הזנה עמוקה ולחות

פרוטוקול שימוש:

מיועד להזרקה מעט עמוקה יותר מסקין בוסטרים רגילים ניתן לשימוש עם קבולה.

ניתן לבצע טיפול בודד או שני טיפולים בהפרש של חודש ניתן ומומלץ להזרקה באזורים עדינים

ציוד נלווה נדרש:

מגיע עם מחטים באריזה: 2x27G
מומלץ לשימוש עם קבולה 25G או מחטי 30G של ELASTY



HAIR

פתרון מתקדם למניעת נשירת שיער והתחדשות צמיחת השיער. המוצר משלב חומצה היאלורונית לא מצולבת עם מגוון רחב של פפטידים ייעודיים להזנה עמוקה של הקרקפת ושיפור מצב השיער.

תכולת המזרק: 1ml

8mg/1ml Sodium Hyaluronate
Copper peptide, Decapeptide - 18
Biotinyl tripeptide - 1
Acetyl tetrapeptide-3

התווית שימוש:

מניעת נשירת שיער והתחדשות צמיחת השיער
שדרוג משמעותי לטיפול PRP (בשימוש לסירוגין)

פרוטוקול שימוש:

לסדרת טיפול מלאה מפגש כל שבועיים למשך שלושה חודשים

ציוד נלווה נדרש:

ציוד בסיסי לחיטוי
מגיע עם מחטים באריזה: 2x30G
*מומלץ לשימוש עם מחטי 32G*4mm ELASTY



MESO - HAIR

מזותרפיה בפורמולה ייחודית המתאימה להזרקה או החדרה עמוקה באמצעות רולר לקרקפת. הקוקטייל הייחודי מכיל שילוב פפטידים עם אבץ המחזק את סיב השערה ומחדש צמיחת שיער בריא.

תכולת המארז: 10 ווילים 5מ"ל כל אחד

8mg/1ml Sodium Hyaluronate
Zinc Sulfate (>0.1%)&Vitamin B6 (>0.1%)
Copper Peptide(>20ppm)
Acetyl Tetrapeptide-3(>20ppm)
Biotinyl Tripeptide-1(>20ppm)

התווית שימוש:

מניעת נשירת שיער והתחדשות צמיחת השיער
שדרוג משמעותי לטיפול PRP (בשימוש משולב)

פרוטוקול שימוש:

לסדרת טיפול מלאה יש לקיים 6-8 מפגשים
פעם בחודש

ציוד נלווה נדרש:

ציוד בסיסי לחיטוי
רולר או מחטי 32G (במחטי 33/34G) ELASTY



Skin-Anti-Acne Solution

הבשורה הבאה בתחום טיפולי האקנה בעולם!!



תכולת המארז: 10 וויילים 5מ"ל כל אחד
 3mg/1ml Sodium Hyaluronate
 Allantoin(>0.1%), Zinc Sulfate(>0.1%)
 Myristoyl Hexapeptide-23(>20ppm)

התווית שימוש:

מתאים לשימוש במצבי אקנה שונים, כולל אקנה פעיל בפנים ובגוף. טיפול עור זה אידיאלי לעור רגיל, שמן ומעורב. ניתן לשלב עם טיפולי אקנה נוספים.

פרוטוקול שימוש:

יש לחזור על הטיפול לפחות פעם בחודש למשך 3 חודשים. הזרקה במחט ברובד שטחי.

ציוד נלווה נדרש:

ציוד בסיסי לחיטוי
 חולר או מחטי 32G (ELASTY 34G*4mm) במחטי



מנגנון פעולה

טיפול יעיל נגד התפרצויות אקנה הפועל מיידית לאחר ההזרקה ותורם לריפוי העור, הפחתת דלקתיות, נפיחות ואדמומיות הנלווים לאקנה.

לכל אחד ממרכיבי הפורמולה הייחודית השפעה בפני עצמו:

Allantoin - ההשפעה הקרטוליטית של האלאנטוין מאפשרת את פינוי הנקבוביות מפסולת, מתאי העור המתים ומפחיתה את הסיכויים העתידיים לחסימת נקבוביות הגורמות לקומדונים.

Zinc Sulfate - תוספת מלח האבץ מאזנת את פעילות בלוטות החלב ומפחיתה את פעילותן המואצת.

הפפטיד הפעיל החדשני, **Myristoyl Hexapeptide-23** הינו ליפופפטיד סינתטי אנטיביוטי בעל תכונות אנטיבקטריאליות נקודתיות נגד *Propionibacterium acnes* (*Cutibacterium acnes*). באמצעות צמצום משמעותי של אוכלוסיית החיידקים, פוחתת גם האפשרות להתפרצות אקנה עתידית.

נוסחה זו נתמכת גם בתוספת של **HA** לא מצולבת המשפרת את לחות העור, מפחיתה דלקתיות ומזינה את הרקמות.

מוצרי מזותרפיה לבעיות עור שונות כאשר לראשונה בעולם תמצאו בפורמולות המיוחדות גם **רכיבים אנטיביוטיים ושילובים חדשניים** שהוכחו כיעילים קלינית.

Revitalizing

פורמולת מזותרפיה המכילה Trehalose (דו סוכר טבעי) המאט את ההזדקנות העור, משפר פגמנטציה ומעניק אחידות לגוון העור.

תכולת המארז: 10 וויילים 5מ"ל כל אחד

HA content: 10mg/ml

Trehalose(>1%)

התווית שימוש:

מתן לחות, זוהר ושיפור אחידות גוון העור מתאים לשימוש באזורי הפנים והצוואר לא לשימוש מסביב לעיניים.

ציוד נלווה נדרש:

ציוד בסיסי לחיטוי
רולר או מחטי 32G (במחטי 33/34G) (ELASTY)



Skin Rejuvenating Solution +

פורמולה אפקטיבית המכילה פפטידים להפחתת קמטוטים והחלקת קמטים באזורי הטיפול.

תכולת המארז: 10 וויילים 5מ"ל כל אחד

HA content: 8mg/ml

Tripeptide-1(>20ppm)

Caprooyl Tetrapeptide-3(>20ppm)

התווית שימוש:

הזנת העור והפחתת קמטוטים. מתאים לשימוש ב: בפנים, צוואר וגב כפות הידיים, כמו כן מתאים לשימוש בגוף

ציוד נלווה נדרש:

ציוד בסיסי לחיטוי
רולר או מחטי 32G (במחטי 33/34G) (ELASTY)



Repair

פורמולת מזותרפיה המכילה רכיבים פעילים הגורמים לחידוש ושיקום רקמות. הטיפול פועל להגנה מפני נזקים סביבתיים ומתן מענה למצבי עור בהם נדרשת החייאה של העור למראה בריא.

תכולת המארז: 10 ווילים 5מ"ל כל אחד

5ml (HA content: 3mg/1ml)

Allantoin(>0.1%)

Hexapeptide-9(>20ppm)

Tetrapeptide-30(>20ppm)

התווית שימוש:

תיקון והחייאת העור לשיפור גמישות ומרקם.

ציוד נלווה נדרש:

ציוד בסיסי לחיטוי

רולר או מחטי 32G (במחטי ELASTY 33/34G)



LS

המרכיב הפעיל DMAE הוא רכיב בעל יכולות מיוחדות לשיקום התשדורת הבין עצבית. הוא מעודד את שיפור טונוס השרירים ועל ידי כך גורם להידוק העור והחלקתו. משפר מראה עור עייף ומעניק מראה מתוח.

תכולת המארז: 10 ווילים 5מ"ל כל אחד

HA content: 3mg/1ml

DMAE(>0.2%)

התווית שימוש:

מיצוק העור ואפקט הרמה, מתאים לשימוש באזורי גוף כמו ירכיים עליונות, מותניים, שוקיים, בטן וזרועות.

ציוד נלווה נדרש:

ציוד בסיסי לחיטוי

רולר או מחטי 32G (במחטי ELASTY 33/34G)



**תכולת המארז: 5 מסיכות ארוזות כל אחת בנפרד**

10mg/1ml Sodium Hyaluronate
25ml חומצה היאלורונית במסיכה

התווית שימוש:

מומלץ לשימוש לאחר טיפולים אסתטיים לטובת האצת תהליך החלמת העור והחדרת לחות גם לשכבות החיצוניות. לשימוש מקצועי, מוצר רפואי מאושר CE.

פרוטוקול שימוש:

לאחר טיפול אסתטי או כל טיפול המשלב פציעה מבוקרת של העור.

יש להניח את המסיכה על פנים יבשות ונקיות, להמתין 15-30 דקות ולתת לחומר להיספג בעור. מומלץ לא לשטוף את שאריות המסיכה מיד לאחר השימוש אלא להמתין לספיגה איטית.

מזינה את העור ומרפאה חתכים ופציעות שטחיות.

מתאימה לשימוש במצבים של סימני דקירה מהמחט, טיפולי רולר וכדומה, במצבים של כוויות או פציעות אחרות יש לפעול בהתאם לשיקול דעת רפואית.

ELASTY החומצה ההיאלורונית המובילה בישראל והאיכותית בעולם! לתוצאות משמעותיות, הנשמרות לאורך זמן.

- היחידה והבלעדית עם 100% צילוב
- פרופיל הבטיחות הטוב ביותר
- יותר תוצאה ליותר זמן
- לכידות גבוהה המונעת נדידת חומר

צילוב
בטיחות
תוצאה

100%



היזהרו
מחיקויים

לראשונה והבלעדית בעולם עם 100% צילוב


חומרי המילוי של ELASTY מופקים באמצעות טכנולוגיית PNET המוגנת בפטנט. בתהליך זה החומצה ההיאלורונית המצולבת עוברת מספר תהליכי סינון נוספים לניקוי שאריות BDDE, אנדוקסונים חופשיים, וחלקיקי "צילוב פתוח" כך שתכולת המזרק הינה 100% חומצה היאלורונית מצולבת, בעלת שרשראות מולקולריות חזקות במיוחד. לצורך השוואה בפילרים דומים יש בד"כ 10-20% חומצה לא מצולבת, מה שגורם להזרקת חסר ופירוק מהיר יותר. שיטת הפקה זו גורמת לה להיות בעלת עמידות גבוהה יותר בפני פירוק ביולוגי בהשווא לחומצות אחרות הקיימות בשוק. ELASTY מאופיינת ביכולות ההרמה המשמעותיות שהיא מאפשרת לרופא/ה ותוצאות שמחזיקות לאורך זמן.

חומצה טהורה, ללא תוספים 100% מצולבת בריכוז 24mg/ml לעומת מתחרים להם תכולה של בין 10-20% חומצה לא מצולבת.



בטיחות

ELASTY בעלת פרופיל הבטיחות הטוב ביותר - רמת ה-BDDE הנמוכה ביותר מבין כלל החומצות הקיימות. למרות היות ELASTY מרוכזת ועמידה יותר בפני פירוק, רמת תוסף ה-BDDE בחומצה עד פי 10 פחות מהתקן האירופאי וכרבע מהמתחרה המובילה בקטגוריה לפנייה.

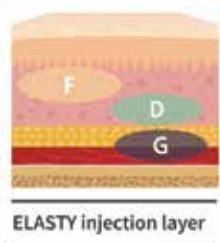

ELASTY injection layer



F

ELASTY FINE

רמת סמיכות הנמוכה בסדרה אידיאלית להזרקה שטחית ולאזורי עור עדינים



D

ELASTY DEEP

רמת סמיכות בינונית מתאימה לרוב אזורי הפנים במיוחד לפיסול השפתיים



G

ELASTY GRAND

רמת סמיכות גבוהה להרמה ומילוי מיטביים במיוחד לפיסול פנים



הכוונה והמלצות שימוש

היתרונות בעבודה עם חומצה 100% מצולבת:

בעת העבודה עם החומצה של ELASTY יש לקחת בחשבון כי חומר זה בעל מנגנון פעולה מעט שונה מהחומצות הקיימות בשוק.

יש לשים לב:

1. החומצה הינה מרוכזת ולכן אותה כמות חומר תספק תוצאה רבה יותר ותישמר לאורך זמן ממושך יותר. נמליץ בתחילת העבודה לבצע Under correction לצורך היכרות ועדכון שיטות העבודה.
2. בשל היותה חומצה טהורה, ELASTY סופחת יותר נוזלים מחומצות אחרות.
3. אין צורך לבצע Over correction כי התוצאה רק תגבר לאחר ההזרקה ולא תפחת לאחר מספר ימים מההזרקה כנהוג בחומצות אחרות.
4. השתדלו לבצע פחות דקירות על מנת לא לייצר טראומה וכן להזריק מעט עמוק יותר מהרגיל כדי להימנע משחרור יתר של נוזלי פלזמה.
5. מזרקי ELASTY מגיעים עם המחסים (27G/30G) המיוחדות בעלות הדופן הדקה של ELASTY המאפשרות הזרקה מדויקת יותר ועם פחות כאב. יש להקפיד להשתמש במחסים המגיעות בקופסה.

החומצה ההיאלורונית של Sofiderm המובילה באיכות אל מול עלות ללא תחרות. מוצרים בטוחים הנמכרים מעל עשור בישראל ובמעל ל-75 מדינות נוספות.



- **Sofiderm Derm Sub-skin**
לחיים, סנטר, קו לסת, מתן נפח ואפקט הרמה (LIFT)



- **Sofiderm FineLines**
שקעי עיניים, מינימום ספיחת נוזלים



- **Sofiderm Deep**
חומר רב שימושי: שפתיים, קמטים בינוניים, מריונט, נאזולביאלים



החומצה ההיאלורונית של סופידרם


את רמת הסמיכות משנה היצרנית על ידי טכנולוגיה יחודית של פריסת החלקיקים בלייזר ולא על ידי שינוי דילול או ריכוז החומצה עצמה. מכך, כל הסמיכויות של מזרקי סופידרם הינן בריכוז זהה של 20mg/1ml.

כל אחת מרמות הסמיכות של סופידרם הינה בעלת חלקיקים בגודל אחר, מה שמקנה לה יכולות מילוי טובות באזורים מסוגים שונים.


החל מרמת הסמיכות הגבוהה **Sofiderm Sub-skin** איתה נעבוד באזורים בהם נרצה ליצור מילוי משמעותי. **Sofiderm Deep** מיועד לשימוש באזורים נרחבים ומצוין למילוי ועיצוב שפתיים. **Sofiderm FineLines** מתאים לשימוש באזורים עדינים כמו הזרקה לשקעי עיניים מכיוון שמכיל חלקיקים קטנים לספיחת נוזלים מועטת מאוד.




Sofiderm Finelines
גודל חלקיקים: 0.10 - 0.15 (מ"מ)

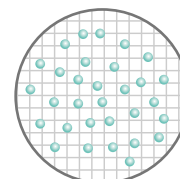

Sofiderm Deep
גודל החלקיקים: 0.28 - 0.50 (מ"מ)

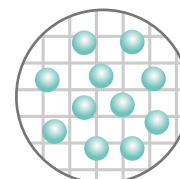

Sofiderm Derm Sub-Skin
גודל החלקיקים: 1.25 - 2.0 (מ"מ)

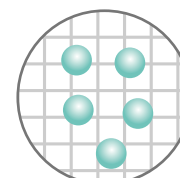

Sofiderm ULTRA - לאחר עשור של הצלחה בישראל, פורמולה חדשה, משופרת ועוצמתית לתוצאה שמחזיקה לאורך זמן ממושך.

סדרת SOFIDERM ULTRA מציעה לרופאים גרסה משודרגת של פילרים בריכוז אחיד של 24mg/ml, עם שינוי מבוקר של צמיגות וגודל חלקיקים בין הפורמולות כך שניתן לבחור את המוצר המתאים בלי לוותר על תחושת עבודה מוכרת ופרופיל הבטיחות הגבוה. ג'ל רך, נוח להזרקה ובעל נוכחות מרשימה ברקמה לפיסול, עיצוב והרמה.



**Sofiderm ULTRA
Derm Sub-Skin**

להשבת נפח בלחיים, סנטר ועצמות לחיים
הזרקה לשכבות העמוקות של הדרמיס
(עד ה-Subcutaneous)



**Sofiderm ULTRA
Deep**

מילוי קמטים בנויים ושכבות ביניים
הזרקה לשכבות האמצעיות של הדרמיס
(Medium Dermis)

**מתאים לפיסול שפתיים
מלאות ובשרניות**



**Sofiderm ULTRA
Derm**

למילוי קמטים עדינים
הזרקה לדרמיס בינוני עליון
(Upper-mid Dermis)

**מתאים לפיסול
שפתיים עדין**

1. ריכוז משופר לעוצמה מקסימלית (24mg/ml) שדרוג מ-20mg/ml ל-24mg/ml. המעניק אפקט הרמה (Lifting) עוצמתי, יכולת מילוי מרשימה ועמידות גבוהה יותר ברקמה.
2. טכנולוגיית HECL – יציבות פוגשת רכות יצירת ג'ל בעל "ויסקואלסטיות מאוזנת": מטריצה תלת-ממדית חזקה (Robust) המבטיחה עמידות לאורך זמן, בשילוב מרקם רך (Soft Texture) המשתלב בהרמוניה טבעית.
3. חווית הזרקה חלקה ומדויקת (Smooth Injection) כוח דחיפה אחיד המאפשר זרימה קלה של החומר, שליטה אבסולוטית לרופאים, דיוק בפיסול ומניעת גושים.
4. יעילות קלינית מוכחת (12 חודשים) הצלחה מחקרית: 92.3% שיפור אסתטי (GAIS) ו-88.5% שביעות רצון בקרב מטופלים לאחר שנה של טיפול

מוצרי העזר של ELASTY פסגת הטכנולוגיה בתחום ההזרקות

מחטים לשימוש אסתטי והזרקות תוך עיניות

טכנולוגיית חיתוך ראש יהלום ו- Ultra Thin Wall :

דיוק מירבי


הפחתת כאב משמעותית

משך התאוששות קצר יותר לאחר הטיפול

מינימום תופעות לוואי



Elasty needle		Other needle		Gauge
קוטר פנימי	קוטר חיצוני	קוטר פנימי	קוטר חיצוני	
0.18 mm	0.12 mm	0.20 mm	0.08 mm	34G
0.26 mm	0.20 mm	0.26 mm	0.10 mm	33G
0.28 mm	0.22 mm	0.28 mm	0.13 mm	32G
0.30 mm	0.24 mm	0.30 mm	0.16 mm	30G
0.40 mm	0.30 mm	0.40 mm	0.20 mm	27G

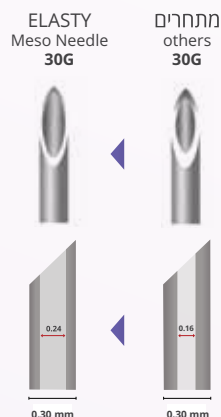

קוטר פנימי גדול משמעותית המאפשר מעבר נפח גדול עד 100% יותר בהשוואה למחטים רגילות. משמשת גם רופאי עיניים ובתי חולים מובילים בישראל להזרקות תוך עיניות ופרוצדורות מורכבות.

עובי מחט	אורך
27G	13mm
30G	4 / 6 / 13mm
32G	4 / 6 / 8 / 13mm
33G	4 / 6 / 8 / 13mm
34G	1.5 / 2 / 4 / 6 / 8 / 13mm



מזרקי אינסולין אסתטיים

מזרקים אסתטיים מיוחדים, המשמשים להזרקת בוטוקס ושימושים עדינים נוספים. להנות מהפשטות שבעבודה עם מזרק המחובר כבר למחט, בגדלים בלעדיים בארץ!



כל מזרק ארוז בנפרד באריזה סטרילית

גודל מזרק	עובי מחט
0.5 / 1.0 ml	31G
0.3 / 0.5 / 1.0 ml	32G

מחטי הקסם של ELASTY™

ELASTY הקנולות המובילות לפילרים ושאיבת שומן

- דופן אולטרה דקה - Ultra thin wall להזרקה נוחה יותר בעובי קנולה דק יותר
- הרכת מתכות מיוחדת המאפשר אלסטיות מדודה ומדויקת לעבודה נוחה במיוחד!
- פחות טראומה וזמן התאוששות קצר
- **מבנה ארגונומי מיטבי**
- פתח הזרקה קרוב לקצה, המאפשר דיוק וחסכון בחומר



עובי קנולה	אורך
30G	25mm
27G	40 / 50mm
25G	40 / 50mm
23G	50mm
22G	50 / 70mm
20G	70mm
18G	100mm

* 24 קנולות במארז.



הקנולות של ELABO


הקנולות של ELABO מגיעות בדרגת קשיחות גבוהה ובטכנולוגיית דופן דקה.



עובי	אורך
30G	25mm
27G	40 / 50mm
25G	40 / 50mm
23G	50mm
22G	50 / 70mm

* 20 קנולות במארז.

היתרונות המבניים של אלבו

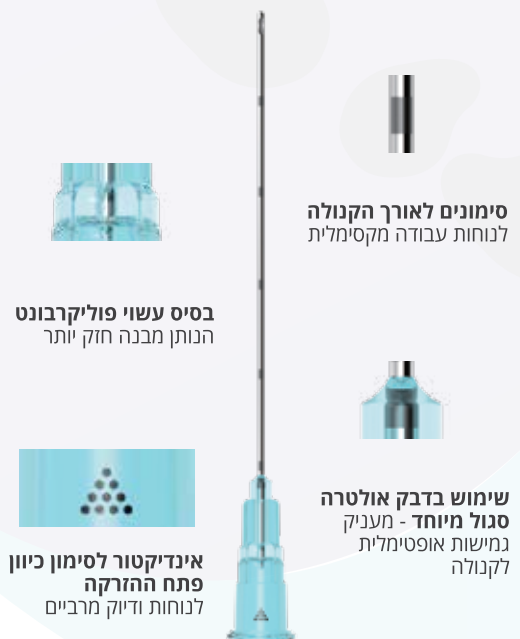



חוט הרמה המשלב שני סוגים של זיזים ליצירת אפקט מתיחה מירבי



כושר מתיחה ואפקט עגינה חזקים משמעותית מחוטים מקבילים בעלי זיזים אחידים. חוט ייצוק המיוצר בהליך מיוחד ללא שימוש בחום, מה שמגביר את עמידותו. כמו כן, הזיזים בנויים בצורה דו כיוונית על מנת לאפשר אחיזה מירבית, ומעבר לכך לזיזים מנגנון מיוחד הגורם לפתיחתם מתחת לעור.

במארז	אורך החוט	קנולה	
10	180mm	100mm 18G L cannula	FORTE DOUBLE

אלסטי פורטה פיקס

קיבוע כזה עוד לא נראה, החוט ה-4 מימדי ליצירת אפקט מתיחה מאסיבי



החוט החדש ביותר מבין הפורטפוליו של החברה, מספק מתיחה, אחיזה וקיבוע מעולים, באמצעות טכנולוגית אפקט הפרפר - עיצוב רב כיווני 4 - מימדי המיוצר בטכנולוגית לחיצה ללא חום. טכנולוגיה חדשנית זו תורמת למראה חלק יותר של פני העור לאחר הטיפול, על ידי איזון תנועת הנפח המרכזי ובאמצעות מיקוד סלקטיבי של אזורי המתיחה והתמיכה.

לתוצאה מושלמת ללא כיווצי עור באזורי המתיחה.

במארז	אורך החוט	קנולה	
10	182mm	100mm 18G L cannula	FORTE FIX

ELASTY™

FEEL THE DIFFERENCE

חוט איתן בצורה בלתי רגילה, על פי מחקרים בעל כושר הרמה של עד כ- 5.8 קילו.


לא רק פנים! מושלם להרמת אזורים שונים בגוף כמו:
מתיחת בטן - מתיחת ישבן - זרועות - חזה



חוט יצוק, המשלב את שיטת השרשרת עם חיתוכים עמוקים יותר להרמה מאסיבית.
מעולה לשימוש במקרים של נפח פנים גדול להרמה.
יכולת המתיחה הגבוהה יכולה להביא לחיסכון במספר החוטים

קנולה	אורך החוט	במארז
V UP	100/60mm 19G L cannula	180/150mm
		10


הכוונה והמלצות שימוש

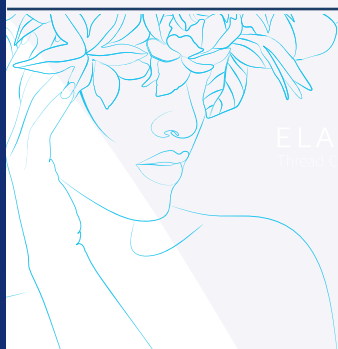


ELASTY

V UP™


Use for

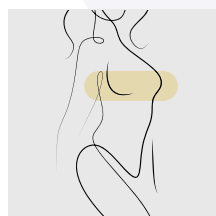


body

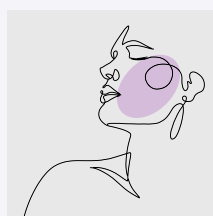

total-face

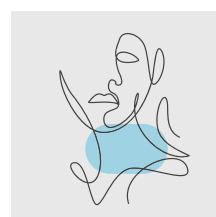

neck

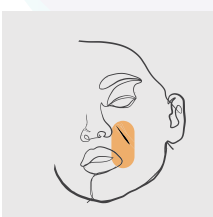

nasolabial fold


FORTE FIX




FORTE Double™



Use for

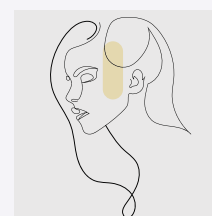


mid-face

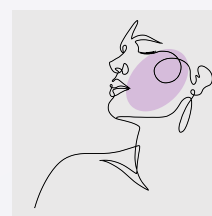


total-face



mandible

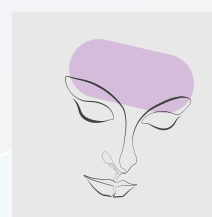

brow

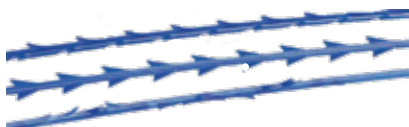

חוטים אלו עשויים על בסיס פולידיוקסאנון (PDO) שהוא פולימר נספג וגמיש, החומר משמש ליישומים ביו-רפואיים רבים עשרות שנים ונחשב לנוח ובטוח ביותר. פירוק ביולוגי מלא מתרחש תוך 6-12 חודשים לערך.

החוט המהפכני ביותר בשוק הישראלי, תרכובתו המכילה **חומצה פולילאקטית** הופכת אותו לחוט האיכותי ביותר לטווח הארוך. החומצה הפולילאקטית מאיצה את תהליכי ייצור הקולגן והאלסטין באופן מהותי ולאורך זמן משפרת את מרקם העור גם מבחוץ. פירוק ביולוגי מלא מתרחש תוך 18 ~ 24 חודשים לערך

מגוון קנולות לנוחות מירבית



קנולה W

היא הנפוצה והשימושית ביותר בארה"ב ובעלת מקדם בטיחות גבוה יותר

* קנולה W עם פתח אחורי - שיטה מיוחדת לעבודה עם חוטי הרמה מסיביים ועבים במיוחד



קנולה L

היא הנפוצה והשימושית ביותר בישראל ובאירופה



קנולה sharp

קנולה חדה לטובת נוחות ומהירות עבודה ללא צורך בשימוש מקדים במחט.

כל הדגמים קיימים בשני המותגים ומאפשרים לעבוד בשיטות הנוחות לך,

תוך בחירת סוג החוט והקנולה המתאימים והמועדפים עליך ביותר.

חוטי מיצוק

מיועדים ליצירת רקמה צלקתית תת עורית ועידוד יצירת קולגן ואלסטין. זו שיטה אשר אינה מטפלת רק ע"י החדרת חומרים זרים אלא מעודדת את הגוף ליצור בעצמו ובאופן טבעי מיצוק והשבת נפחים לטווח ארוך גם לאחר ספיגת החוט. זהו טיפול מנע מצוין אשר ביכולתו גם לשפר קמטוטים קיימים.

Mono - חוטי מונו/ננו חלקים

עובי: 26G / 27G / 29G / 30G

קנולה: חדה

אורך הקנולה: mm 25 / 38 / 50 / 60 / 90

אורך החוט: mm 30 / 60 / 80 / 100 / 150

מגיעים במארז של 10 חוטים / חבילה של 100

אזורים מומלצים לטיפול:

פנים - כללי, צוואר, דקולטה, מסביב לעיניים.



MULTI - חמישה חוטי מונו על קנולה אחת

פתרון מקורי לשיפור חווית הטיפול, קנולה 1 המכילה 5 חוטים הנפרסים מתחת לעור בעת ההחדרה, במקום להכניס את חוטי המונו אחד אחד.

עובי: 23G

קנולה: קנולה L

אורך הקנולה: mm 38 / 60

אורך: mm 25 / 45

מגיעים במארז של 4 קנולות עם 5 חוטים / חבילה של 40

אזורים מומלצים לטיפול: כלל הפנים



SCREW / DOUBLE SCREW

חוט ספירלי או ספירלי כפול מלופף סביב קנולה, בעל שטח פנים גדול מחוטי מונו חלקים ולכן פעילות המיצוק משמעותית יותר. קיימים בשני סוגים: חוט ספירלי 1 או שניים מלופפים על אותה הקנולה.

SCREW

עובי: 26G / 27G / 29G / 30G

קנולה: קנולה חדה

אורך הקנולה: mm 38 / 50 / 60 / 90

אורך החוט: mm 60 / 80 / 100 / 160

DOUBLE SCREW

עובי: 25G / 26G

קנולה: קנולה חדה

אורך הקנולה: mm 38 / 50 / 60 / 90

אורך החוט: mm 60 / 80 / 100 / 160

מגיעים במארז של 10 חוטים / חבילה של 100



COIL - החוט המתקדם ליצירת נפח

חוט המסולסל בצפיפות סביב קנולה L ליצירת נפח ומיצוק אולטימטיביים. חוט זה יוצר "מנהרה" התורמת למיצוק מאסיבי. הרקמה הצלקתית והקולגן נוצרים ביעילות לא רק סביב "המנהרה" אלא גם בתוכה. בניגוד לחוטי קוגים, החוט משמש כתוסף נפח ואינו בעל אפקט משיכה פיזי.



עובי: 23G
קנולה: קנולה L
אורך הקנולה: mm 38 / 60
אורך החוט: mm 15 / 25 / 30
מגיעים במארז של 4 חוטים / חבילה של 40

אזורים מומלצים לטיפול:
מצח, בסנטר, לרוחב הלחי, בשוקת דמעה, בקווי המריונטה ולעיבוי טבעי של השפתיים.

DSP - חוט ספירלי עם יכולת הרמה קל

מדהים למיצוק. מבצע גם הרמה קלה באמצעות זיזים קטנים. החוט מלוכף על הקנולה כמו בחוט ספירלי.



עובי: 25G
קנולה: קנולה L
אורך הקנולה: mm 38 / 60
אורך החוט: mm 136 / 185
מגיעים במארז של 4 חוטים / חבילה של 40

אזורים מומלצים לטיפול:
צוואר, דקולטה ומסביב לעיניים.
בעיקר לעור מבוגר דק ועדין

חוטי הרמה מגוון ענק של סוגים, צורות, אורכים, עוביים וגדלים. חוטים חזקים במיוחד היוצרים אפקט הרמה משמעותי. ניתן לבצע באמצעותם הרמות מגוונות באזורים שונים בפנים. חוטים מסוג זה, ננעצים ברקמות העור ומקבעים את הרקמה באזור המבוקש, על ידי כך יוצרים אפקט של מתיחה, הרמה ועיצוב הפנים ללא ניתוח.

FA / FG - חוטי הרמה לאף

חוט ייעודי להליכי פיסול אף תוך כדי הקניית נפח סטריאוסקופי ואחיזה. בעל מבנה ייחודי אשר אינו מצריך מתיחה חיצונית של החוט לאחר החדרתו, כאשר בדגם FA החוט הפנימי התחתון בעל זיזים גם כן ומיועד לטווח פעולה רחב יותר הכולל גם את חלקו התחתון של האף והקצה.

FG - Nose Cog

עובי: 19G
קנולה: קנולה L
אורך הקנולה: mm 80 / 50
אורך החוט: mm 50

FA - Nose Cog

עובי: 21G
קנולה: קנולה L
אורך הקנולה: mm 60
אורך החוט: mm 80

מגיעים במארז של 4 חוטים / חבילה של 40



FE - חוט הרמה מתקדם, דרגה 1 מתוך 3

חוט חזק, המופק באמצעות חיתוך לייזר היוצר זיזים הסובבים לאורך החוט עם זווית של 60 מעלות בין הזיזים, דגם זה יוצר אפקט סטריאוסקופי לכן משמש להרמה ניכרת. מתאים לכל איזורי הפנים.

קנולה	
Sharp	EP-LINE (PDO) FE
L / W cannula	EP-LINE (PDO) FE
Sharp	YOURLINE (PLA-CL) FE
L / W cannula	YOURLINE (PLA-CL) FE

עובי: 19G / 21G / 23G
קנולה: מגוון מפורט בטבלה
אורך הקנולה: mm 38 / 50 / 60 / 90 / 100
אורך החוט: mm 60 / 80 / 100 / 150
 מגיעים במארז של 4 חוטים / חבילה של 40

SC - חוט הרמה מתקדם, דרגה 2 מתוך 3

חוט "יצוק" בשיטת "molding press process" מה שתורם לחוזק משמעותי לעומת דגמים אחרים אפקט מתיחה מעולה בזכות שני כיווני אחיזה. מתאים לכל הפנים ובמיוחד לטיפול פוקס אייז והרמת גבות מהפכניים. זהו החוט השימושי ביותר שיכול להתאים לכל פרוצדורת חוטים נספגים בכל אזורי הפנים.

קנולה	
L / W cannula	EP-LINE (PDO) SC
L / W cannula	YOURLINE (PLA-CL) SC

עובי: 19G / 18G
קנולה: מגוון מפורט בטבלה
אורך הקנולה: mm 60 / 100
אורך החוט: mm 111 / 185
 מגיעים במארז של 4 חוטים / חבילה של 40


SN - חוט הרמה מתקדם, דרגה 3 מתוך 3

חוט "יצוק" בשיטת "molding press process" חדש וייחודי, איתן ועבה הבנוי כמו שרשרת עם חריצים לטובת אחיזה מאוד חזקה מתחת לעור. הודות ליכולת "עגינה" חזקה ביותר זהו הדגם בעל יכולת ההרמה הכי משמעותית בשוק, כאשר בנוסף למתיחה החזקה משלב גם יכולת מיצוק הודות לעובי וטכנולוגיית החריצים שלו.

קנולה	
L cannula	EP-LINE (PDO) SN
L cannula	YOURLINE (PLA-CL) SN

עובי: 18G
קנולה: קנולה L
אורך הקנולה: mm 100
אורך החוט: mm 165
 מגיעים במארז של 4 חוטים / חבילה של 40

Dual Needle

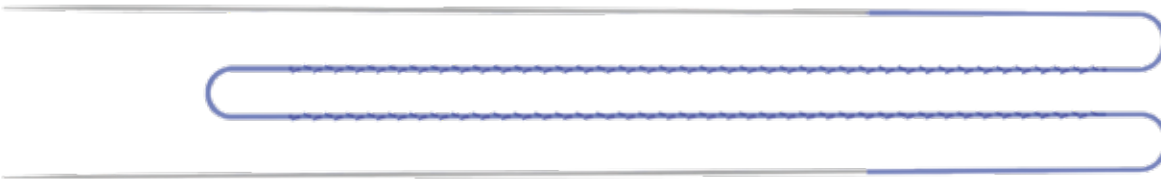

דגם מיוחד זה מורכב מחוט אחד (באורך של עד 420 מ"מ ועובי 21G) ושני מחטים באורך 110 מ"מ, המאפשרים שליטה מדויקת העוזרת לביצועים סימטריים. הדגם דורש מומחיות רבה יותר ומאפשר פעילות בשטחים נרחבים בשילוב עם מתיחה חזקה יותר. חוט זה מושלם לביצוע פעולות חוטים מאסיביות להרמה משמעותית הזזה לניתוחי הרמת פנים.

אורך	סוג	
300mm	Dual Needle	EP-LINE (PDO) FE
420mm	Dual Needle	EP-LINE (PDO) FE
300mm	Dual Needle	YOURLINE (PLA-CL) FE
420mm	Dual Needle	YOURLINE (PLA-CL) FE

אורך	סוג	
300mm	Dual Needle	EP-LINE (PDO) SC
420mm	Dual Needle	EP-LINE (PDO) SC
300mm	Dual Needle	YOURLINE (PLA-CL) SC
404mm	Dual Needle	YOURLINE (PLA-CL) SC

אורך	סוג	
300mm	Dual Needle	EP-LINE (PDO) SN
420mm	Dual Needle	EP-LINE (PDO) SN
300mm	Dual Needle	YOURLINE (PLA-CL) SN
420mm	Dual Needle	YOURLINE (PLA-CL) SN

אולטרסאונד כיס אלחוטי להכוונת הזרקות וטיפולים אסתטיים בזמן אמת

מערכת אולטרסאונד ניידת באיכות קלינית גבוהה, המתחברת ישירות לסמארטפון או לטאבלט ומספקת הדמיה חדה בתדר 14MHz של מבנים שטחיים וכלי דם היקפיים. היא תוכננה במיוחד להכוונת הזרקות פילרים, בוטולינים טוקסין, חוטים ופרוצדורות זעירות-פולשניות נוספות באסתטיקה, אורולוגיה ורפואת כאב.

תכולת האריזה:

- Wireless Pocket Ultrasound Scanner – מערכת כף-יד קומפקטית המתאימה לכיס החלוק
- מטען
- נרתיק נשיאה קשיח ומהודר
- בנוסף: אפליקציית SONO-FINDER ייעודית להורדה חופשית ללא עלות נוספת לרישום או עדכון שנתי (חסכון של מאות דולרים בשנה)

מפרט טכני:

- HD, טווח תדרים 10-14MHz עם דגש על 14MHz
- עומק הדמיה עד כ-3.5 ס"מ מתחת לעור
- מצבי הדמיה: B, B/M, Color, PDI, PW
- תמונות וסרטונים בפורמט MP4 / JPEG נשמרים ישירות למכשיר.
- חיבור אלחוטי Wi-Fi לסמארטפון או טאבלט – Android ו-iOS.
- זמן עבודה רציף עד כ-5 שעות



ציוד נלווה נדרש:

סמארטפון או טאבלט.

SONO-FINDER מבוססת על מתמר Linear Array בתדר גבוה (10-14MHz) לתמונת חתך באיכות גבוהה של שכבות העור, השומן התת-עורי וכלי הדם ההיקפיים. התדר הגבוה מאפשר רזולוציה מצוינת לפרוצדורות אסתטיות המותאם לטיפולים באזור הפנים והגוף העליון. באמצעות מצב Color / PDI ניתן לזהות זרימה בכלי דם, ובמצב B ו-B/M להעריך את עומק ומיקום המחט, הקנולה או החוט ביחס למבנים אנטומיים חשובים, שילוב מדידות על המסך המאפשר תיעוד מדויק של נקודות כניסה, עומק הגעה ומיקום החומר המוזרק לפני ואחרי הטיפול.

קלינית, המערכת מספקת הדמיה מיידית של האזור המטופל, מסייעת בתכנון מסלול ההזרקה ובהערכת התוצאה ובכך משפרת את רמת הבטיחות והדיוק בכל סוגי הפרוצדורות בקליניקה.

בנוסף, התוכנה מאפשרת לצלם בלייב ולתעד באמצעות שליחה אוט' למייל, לכרטיסי לקוחות ייעודיים וכדומה.

התווית שימוש:

לפני הטיפול - מיפוי אנטומי מהיר של האזור המתוכנן, איתור כלי דם ומבנים רגישים.

סימון נקודות כניסה ונתיבי מעבר מועדפים לחוטים, קנולות או מחטים.

במהלך הטיפול - איתור כלי דם היקפיים ומבנים שטחיים לצמצום סיכון לדחירה לאזורים רגישים.

ניווט בזמן אמת של חוטי מיצוק והרמה, הזרקות בוטוקס ופילרים, עם בקרה על עומק וכיוון,

בעיקר באזורים בעלי סיכון ווסקולרי.

לאחר הטיפול - בדיקה ממוקדת של מיקום החומר/החוט, תיעוד התוצאה ההתחלתית והשוואה למעקב עתידי.

כמו כן, אבחון סיבוכים ואיתור חומרים שהוזרקו בעבר.

מזרקי 10ml לשימושים מגוונים לפנים ולפרוצדורות גוף כמו
מילוי גב כפות הידיים, מילוי ברכיים, חזה, עיבוי פין ועוד



המזרק
הנמכר והבטוח
בישראל לטיפולים
באזורים
האינטימיים
לנשים וגברים!

*בעת השימוש במזרק הגדול, לטיפול
גוף יש להשתמש בקנולה 18G

רמות סמיכות שונות גם במזרקי 10 מ"ל.

Sofiderm Deep 10ml - סמיכות גודל החלקיקים: 0.28 - 0.50 (מ"מ)

Sofiderm Derm-plus 10ml - סמיכות גודל החלקיקים: 0.50-1.25 (מ"מ)

Sofiderm Sub-skin 10ml - סמיכות גבוהה גודל חלקיקים: 1.25-2.0 (מ"מ)

הכוונה והמלצות שימוש

רמות הסמיכות הינן אותן רמות הסמיכות כמו במזרקים הקטנים,
לכן ניתן להשתמש בחומר גם עבור טיפולים בפנים, במקרים
בהם נרצה לייצר נפח משמעותי כפי שמצויין בדוגמה המצורפת.



להדרכות וסמינרים על טיפולי גוף
בארץ ובחולל צרו קשר עם
מנהלי האזורים



GLAM APPEAL - פריצת דרך בעיצוב וחיטוב הישבן: הפורמולה המתקדמת שמשלבת נפח אופטימלי עם בטיחות מקסימלית, להענקת תוצאות טבעיות ומרשימות שמחזיקות לאורך זמן.

תכולת האריזה:

50ml Sodium Hyaluronate

התווית שימוש:

GLAM APPEAL מיועד לשימוש כמוצר מילוי נפחים בגוף בלבד.

התווית נגד לשימוש:

המוצר אינו מיועד לשימוש באזור הפנים יש להקפיד על סטריליות מלאה בכל שלבי ההכנה והטיפול

ציוד נלווה נדרש:

קונקטור רב פעמי המיועד לחיטוי - מצורף עם האריזה

קנולות 16G-18G

מחט דקירה

מזרקים ריקים 5ml / 10ml



החומצה הטהורה והמובילה בישראל!

צילוב
בטיחות
תוצאה

100%

מנגנון פעולה

מהפכת עיצוב הישבן של ELASTY משנה את כללי המשחק בתחום פיסול ועיצוב הישבן. בעוד שבעבר טיפולי עיצוב וחיטוב הישבן היו נחלתן של מעטות בלבד, עם עלויות טיפול גבוהות במיוחד ותקופות תוצאה קצרות, GLAM APPEAL מביא בשורה חדשה לשוק. בזכות הטכנולוגיה המתקדמת PNET והפורמולה הייחודית, הטיפול מציע פתרון נגיש ויעיל הרבה יותר, המאפשר לכל אדם להשיג את התוצאות המיטביות. עם נפח אופטימלי של 50mL לבקבוקון ויעילות מוכחת של עד 18 חודשים, GLAM APPEAL מאפשר לרופאים להציע פתרון איכותי יותר ללקוחותיהם, מבלי להתפשר על איכות התוצאות או בטיחות הטיפול.

הכוונה והמלצות שימוש

הכנה מקדימה - יש להפוך את הבקבוקון (vial) למשך 5 דקות לריכוז החומר, להסיר את המכסה הלבן ולחטא את פני השטח.

חיבור הקונקטור - להשתמש בקונקטור הייעודי של GLAM APPEAL מהאריזה הסטרילית לחבר את הקונקטור לבקבוקון במצב הפוך, להדק באמצעות סיבוב של חצי סיבוב ימינה.

הכנת המזרק והעברת החומר

יש להשתמש במזרק בעל חיבור LUER LOCK בלבד, לוודא שהדחפן דחוף עד הסוף ואין אוויר במזרק לחבר את המזרק לקונקטור תוך שמירה על מצב הפוך של הבקבוקון למשוך את הדחפן לאחור בעדינות לשאיבת החומר.

ניתן לחזור על התהליך עם מזרקים נוספים לפי הצורך

הערות חשובות

יש לשמור על הבקבוקון במצב הפוך לאורך כל התהליך במקרה של קושי בשאיבה, ניתן להוסיף 5-10 מ"ל סליין 0.9% הסליין נספג תוך מספר שעות ואינו משפיע על התוצאה הסופית



נוסחת הפטנט הבלעדית של Sunekos לשיפור מרקם העור, מגיעה גם בפורמולות ייחודיות להזרקה למטרות שונות באזורים שונים בגוף! Sunekos BODY

תכולת הקופסה:

Total	10ml
Sodium hyaluronate 200 XD	70 mg
Bottle lyophilized amino acids	
L-Proline	68.1 mg
L-Leucine	12.5 mg
L-Lysine HCl	9.9 mg
L-Vaine	50.4 mg
L-Alanine	68.4 mg

התווית שימוש:

טיפול המפחית סימני מתיחה ומשפר רפיון עור באזורי הידיים, ברכיים, ירכיים והבטן

התווית נגד לשימוש:

אין התוויות נגד משמעותיות מלבד התוויות כלליות של טיפולים אסתטיים

ציוד נלווה נדרש:

מזרקים ריקים בגודל מיטבי לנוחיותך, מחטי שאיבה קנולות 25G (בקנולות ELASTY 27G) 30G (מחטי ELASTY 32/33G)




מנגנון פעולה

Sunekos Body מורכב מ- 10 מ"ל של פורמולת HY6AA במשקל מולקולרי נמוך בשילוב מאוזן ומיוחד לגוף. מתאים לאזורים כמו: רפיון עור בזרועות, בבטן, ירכיים, בעור הברכיים וטיפול בסימני מתיחה. ההרכב והריכוז של כל רכיב אוזנו בטכנולוגיה מיוחדת כדי להתאים את עצמם לכל סוגי העור, בהתאם לחישוב BMI פשוט המבוצע לפני תחילת הטיפול, ככל שדרגת ה-BMI תהיה גבוהה יותר, נשתמש בכמות רבה יותר.


הכוונה והמלצות שימוש

יש לבצע את ההזרקה בסדרה בת 3 מפגשים בהפרש של 10-14 ימים. לשמירה על תוצאות מרשימות לאורך שנים, מומלץ לחזור על טיפול בודד פעם בחצי שנה.


INNER THIGH AND KNEES LAXITY

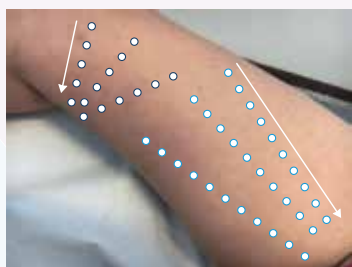

ARMS SEVERE LAXITY

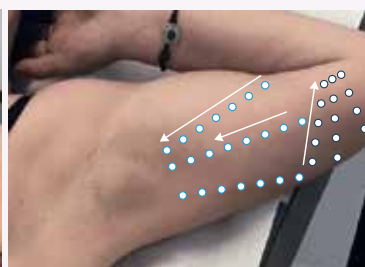

NEEDLE 30G AND 12-13MM
MEDIUM-DEEP DERMIS INJECTION
30°- 45° RETROGRADE LINEAR INJECTION
SERIES OF BOLUS AT A DISTANCE OF ABOUT 1.5CM
0.1 - 0.2 ML PER BOLUS
INJECTION IN THE DIRECTION OF THE FLOW
(VS LYMPH NODES)
MASSAGE FOLLOWING THE FLOW

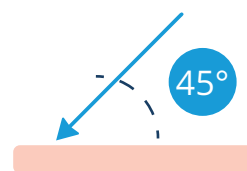

תכולת הקופסה:

Total 15ml

vial 1 : HY6AA (+HH 200 KD)

vial 2 : Carbonate + Bicarbonate salts

התווית שימוש:

אזורים בעלי צלוליט, ירכיים, יישבן וכדומה

ציוד נלווה נדרש:

מזרקים ריקים בגודל מיטבי לנחיותך
קנולות 25G (בקנולות ELASTY)
מחטי 30G (מחטי ELASTY 32/33G)



מנגנון פעולה

Sunekos CELL 15 מטפל בשלבי היווצרות רקמת הצלוליט, הנקראים באופן קליני "Panniculopathic Edematous Fibro Sclerosis (PEFS). הטיפול התוך עורי פונה בעיקר לטיפול בבצקות ובמיקרוסירקולציה באזור המטופל. השילוב בין נוסחת הפטנט של סונאקוס HY6AA, אלקליין Alkaline, קרבונט והביקרבונט, פועלים לאופטימיזציה פעילות ה-ECM והוכחו קלינית כמפחיתי פיברוזיס ודלקתיות באזור המוזרק. כמו כן, גורמים ליצירת **קולגן מסוג 4 ו- קולגן מסוג 7**, אלסטין, פיברונקטין ומתאמי אנגיוגנזה.




30°

Medium/Deep Dermis


שימוש במחט:

- NEEDLE 13MM, 30G
- NEEDLE INCLINATION 30°
- MEDIUM DEEP DERMIS
- 0.15 ML PER POINT
- PERPENDICULARLY TO FOLDING LINES

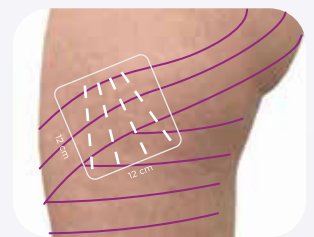


שימוש בקנולה:

- CANNULA 27G AND 40-50 MM OR 22G AND 50-70MM
- DEEP DERMIS INJECTION
- FAN TECHNIQUE
- 0.8 ML PER INJECTION

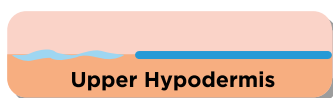

Upper Hypodermis

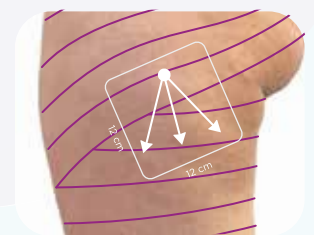

Sunekos Inticare - פתרון פורץ דרך לשיקום בריאות ונראות הרקמות באזור נרתיקי, ללא הורמונים וללא תוספים כימיים, עם תוצאות מוכחות קלינית.

sune
KOS

תכולת הקופסה:

3ml non-cross linked LM Weight HA X 2 vials
2bottles 100 mg AA -6AA Formula

התווית שימוש:

מיועד לטיפול באטרופיה וגינלית ותסמיניה, ניוון והידלדלות רקמות, שיפור לחות, אלסטיות ואסתטיקה של האזור הוולבו-נרתיקי.
שפתיים חיצוניות (Labia Majora) שיפור נפח ואלסטיות מרקם עור ושינוי צבע. **שפתיים פנימיות (Labia Minora)** שיפור לחות, גמישות ונוחות האזור, הפחתת רגישות וגירויים לחוויה טבעית נעימה יותר
פרוזדור (Vestibule) הפחתת רגישות וגירויים
פתח הנרתיק (Vaginal Introitus) שיפור גמישות ונוחות
דפנות הנרתיק (Vaginal Walls) חידוש לחות ואלסטיות.

התווית נגד לשימוש:

זיהום פעיל באזור ההזרקה כמו הרפס, פצעים פתוחים, במצב של הריון והנקה מומלץ להמתין עם הטיפול.

ציוד נלווה נדרש:

מזרקים ריקים בגודל מיטבי לנוחיותך, מחטי שאיבה
לידוקאין להזרקה
מחטי 30G (32G במחטי ELASTY)




ייעודי
להזרקה
נרתיקית

מנגנון פעולה

פתרון חדשני לשיקום הרקמות הרכות באזור הוולבו-נרתיקי, המבוסס על פורמולה מוגנת בפטנט של חומצה היאלורונית ושש חומצות אמינו טבעיות. הטיפול מחדש את ה-ECM, מבצע הידרציה עמוקה ומשפר את הלחות הטבעית והאלסטיות, מפחית אי נוחות, גירוי וכאב.
ללא הורמונים וללא זמן החלמה, עם תוצאות קליניות מוכחות - מחקרים מראים שיפור מובהק ברמת הלחות, האלסטיות, ונוחות הרקמות לאחר סדרת טיפולים.

הכוונה והמלצות שימוש

יש לבצע את ההזרקה בסדרה בת 3 מפגשים בהפרש של 10-12 ימים.
לשמירה על תוצאות מרשימות לאורך שנים, מומלץ לחזור על טיפול בודד פעם בחצי שנה.

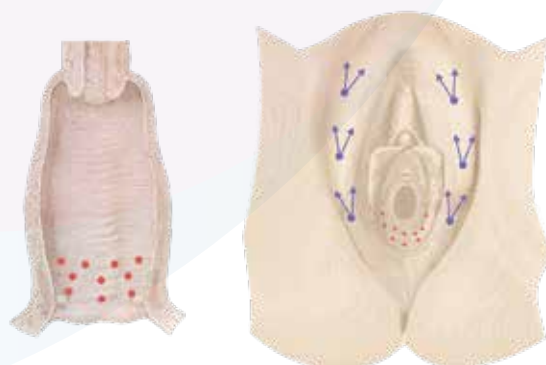

סונקוס - INTICARE

[illegible]